



ARTro jest zaawansowanym technologicznym aparatem elektrochirurgicznym, zaprojektowanym z myślą o wszystkich procedurach artroskopowych – monopolarnych i bipolarnych.

Aparat ARTro umożliwia waporyzację, cięcie oraz koagulację bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Dodatkowo daje możliwość korzystania ze standardowych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. Automatyczna regulacja parametrów wyjściowych gwarantuje szybką i efektywną pracę.

Obsługa aparatu ARTro oparta jest na systemie SmartDevice, który identyfikuje podłączone narzędzie. Tryby pracy oraz nastawy wyjściowe dobierane są automatycznie dla podłączonego instrumentu.


ARTro to aparat, który sprosta wymogom każdej sali operacyjnej.



ZALETY URZĄDZENIA

- wszechstronność - praca monopolarna i bipolarna
- maksymalnie uproszczona obsługa
- kolorowy wyświetlacz z **ekranem dotykowym**
- zaawansowane tryby bipolarnie do pracy w roztworze NaCl
- automatyczna regulacja parametrów pracy - **SpectrumResult**
- rozpoznawanie podłączonych narzędzi - **SmartDevice System**
- szybkie przywołanie nastaw dla podłączonego instrumentu
- duży wybór instrumentów o różnych kształtach i rozmiarach
- wyposażenie wielorazowego użytku pozwala na zmniejszenie kosztów zabiegu
- dedykowany **wózek** z wygodną szafką na akcesoria

Cięcie

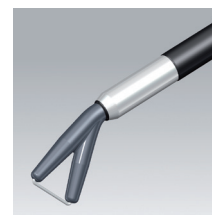


Waporyzacja



Koagulacja



SmartDevice System

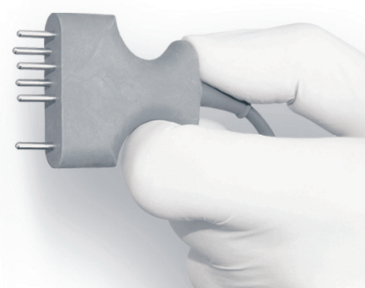

bipolarne elektrody artroskopowe SDS

58S-010 115 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5mm, kabel SDS 3m
58S-030 170 mm



58S-020 115 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4mm, kabel SDS 3m
58S-060 170 mm



58S-040 115 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4mm, kabel SDS 3m



58S-090 115 mm Elektroda bipolarna, pętla "Cobra", kabel SDS 3m
58S-011 170 mm



58S-110 115 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji -Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm, kabel SDS 3m
58S-140 170 mm



58S-160 115 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, kabel SDS 3m
58S-170 170 mm



58S-070 115 mm Elektroda bipolarna, kulka, 2,4mm, kabel SDS 3m




instrumenty z nierozłącznym kablem

100-610 Aparat elektrochirurgiczny ARTro

080-061 Wózek TinyLine do aparatu ARTro

100-302 Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy

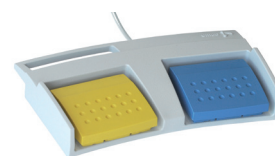

Włącznik nożny 2-przyciskowy

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl

EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryżowa 69a | 05-816 Opacz Kolonia
tel: +48 (22) 723 08 00 | fax: +48 (22) 723 00 81 | emed@emed.pl

Nr ref. 2015.12.K33.PL

emed
confidence in performance