

aria

system odsysania dymów operacyjnych





aria - stworzona by podnieść komfort pracy oraz zapewnić bezpieczeństwo całego zespołu podczas zabiegów elektrochirurgicznych.

Dymy operacyjne są nieodłącznym elementem zabiegów elektrochirurgicznych. Dym powstający podczas przecinania i koagulacji tkanek może pogarszać widoczność pola operacyjnego. Zmniejsza także komfort pracy zespołu operacyjnego.

Dym operacyjny może w dłuższym okresie czasu mieć negatywny wpływ na zdrowie osób wykorzystujących elektrochirurgię w codziennej pracy.

System **aria** kompatybilny ze **spectrum** oraz pozostałymi urządzeniami EMED pozwala na bezpieczną i komfortową pracę w sali operacyjnej.

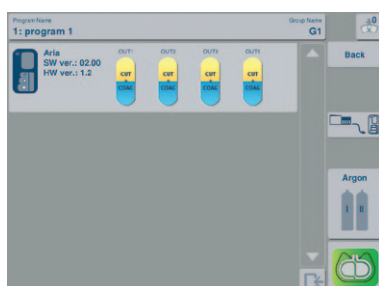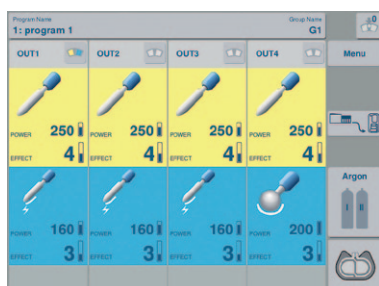

Zalety odsysacza **aria**:

- **Ciche działanie** nie zakłóca pracy podczas zabiegów operacyjnych
- Długa, **35-o godzinna żywotność** filtra pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia
- Wszechstronny, **3-portowy filtr** pozwala na podłączenie akcesoriów 6 mm, 9,5 mm lub 22 mm bez stosowania dodatkowych adapterów
- **Regulowany przepływ** umożliwia dostosowanie parametrów pracy do aktualnych potrzeb
- Możliwe **sterowanie ręczne lub przy użyciu włącznika nożnego** w przypadku używania z pozostałymi urządzeniami elektrochirurgicznymi
- Integralny z systemem elektrochirurgicznym **Spectrum** - automatyczne uruchomienie pozwala na odsysanie wraz z aktywacją cięcia lub koagulacji

Dane techniczne odsysacza dymów aria

Klasa bezpieczeństwa	Znak CE
	Bezpieczniki
Wyświetlacz	LED
	Stan zużycia filtra
	Przepływ
	Serwis
Napięcie znamionowe	230 V, 50 Hz
Płynna regulacja przepływu	TAK
Poziom hałasu	Max 55,0 dBA
Włącznik nożny	Standardowy, pneumatyczny
Automatyczna aktywacja	TAK (spectrum)
Standardowy wąż	
Ø 22 mm	708 LPM (litrów na minutę)
Ø 9,5 mm	130 LPM (litrów na minutę)
Ø 6,4 mm	57 LPM (litrów na minutę)
Wymiary	150 mm x 280 mm x 400 mm
Waga	4,3 kg



020-001 Odsysacz dymu ARIA

Wyposażenie systemu odsysania dymów operacyjnych aria



848-030 Uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodą nieklejącą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin, sterylne, op. 10 szt.



PA2010 Nakładka na uchwyt z przewodem 10 mm x 122 cm
Sterylne, 1-razowego użytku, opakowanie 10 szt.



BFPF7/8-10 Aria filtr wstępny, jednorazowego użytku, 10 szt.



VS353 aria - filtr wymienny

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl

EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryżowa 69a | 05-816 Opacz Kolonia
tel: (22) 723 08 00 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

Listopad 2014

emed
confidence in performance