


elektrochirurgia

kompaktowe rozwiązanie w praktyce prywatnej

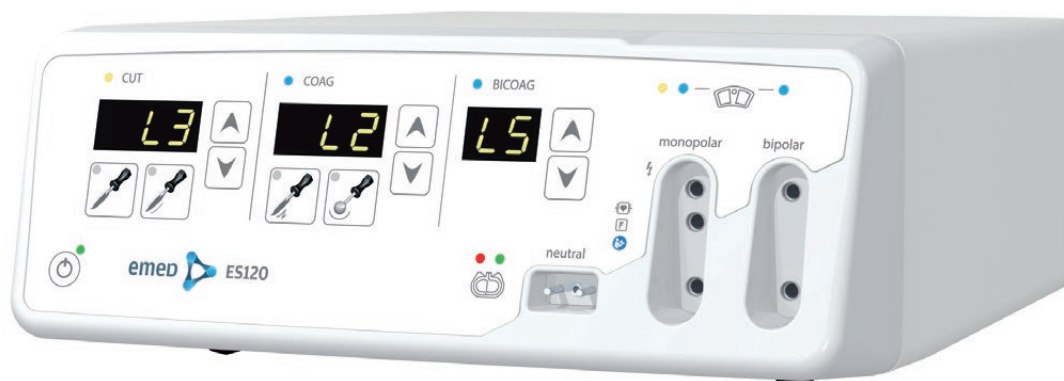

ES120

Aparat elektrochirurgiczny

ES 120 to aparat elektrochirurgiczny, który wykorzystuje przepływ prądu wysokiej częstotliwości do przecinania i koagulowania.

Wszechstronność zastosowań

Aparat umożliwia wykonanie zabiegów z użyciem trybów monopolarnych i bipolarnych. Świetnie sprawdza się w zabiegach chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych oraz wielu innych.

Automatyczna regulacja mocy

Aparat wyposażony jest w system automatycznego dopasowania mocy, który na podstawie pomiarów w czasie rzeczywistym reguluje moc wyjściową. Dzięki temu umożliwia uzyskanie powtarzalnego efektu, niezależnie od warunków pracy.

Komfort pracy

Niewielkie rozmiary urządzenia i estetyczny wygląd w połączeniu z jego niezawodnością oraz łatwością obsługi zapewniają najwyższy komfort pracy.

Bezpieczeństwo

Wewnętrzny test urządzenia i podłączonego osprzętu oraz system kontroli podłączenia elektrody neutralnej gwarantują maksymalne bezpieczeństwo użytkownika oraz pacjenta.

Konfiguracja wyjść

Aparat wyposażony jest w gniazdo monopolarne 3-pin i bipolarne 2-pin. Aparat jest również dostępny w wersji z dwoma gniazdami SDS.

Przykładowe zastosowania:

- niewielkie zabiegi chirurgii ogólnej (ambulatoryjnej)
- zabiegi dermatologiczne
- zabiegi ginekologiczne
- zabiegi chirurgii plastycznej i estetycznej
- zabiegi chirurgii stomatologicznej

Zalety aparatu ES 120:

- estetyczny design i niewielki rozmiar
- skuteczność i szybkie działanie
- niskie koszty eksploatacji



akcesoria do aparatu elektrochirurgicznego ES 120



100-015 Aparat elektrochirurgiczny ES 120



Uchwyt elektrody 4 mm

322-145 uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-pin



Włącznik nożny

100-302 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy



100-301 1-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy



Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE

812-80H hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm²



Kabel elektrody neutralnej jednorazowej

380-030 dł. 3m, wtyk płaski

Elektrody monopolarne



520-500 Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm




521-420 Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm



521-220 Elektroda pętla druciana, 10mm, uchwyt 4mm



524-020 Elektroda kulka prosta, 4mm, dł. 100mm, uchwyt 4mm

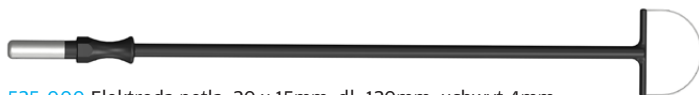

525-000 Elektroda pętla, 20 x 15mm, dł. 120mm, uchwyt 4mm



526-400 Elektroda żagielek, 10 x 25mm, dł. 115mm, uchwyt 4mm



Kabel bipolarny

351-131 dł. 3m, złącze kątowe, wtyk 2-pin 29mm



Szczypce bipolarne

605-014 kątowe, 1mm, dł. 160mm

Informacje zawarte w tej ulotce są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia i dystrybutorów sprzętu medycznego.



Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu. Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl



Uwaga! Niniejsza ulotka nie zastępuje instrukcji używania! Należy zapoznać się z instrukcją używania!

Copyright© EMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody EMED jest zabronione.

EMED SP. Z O. O. SP. K. | Ryżowa 69a | 05-816 Opacz-Kolonia
tel: 22 723 08 00 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

emed
confidence in performance

REF 2023.01.K19.PL