

ARIA

system odsysania dymów operacyjnych




ARIA – stworzona, by podnieść komfort pracy oraz zapewnić bezpieczeństwo całego zespołu podczas zabiegów elektrochirurgicznych.

Dymy operacyjne są nieodłącznym elementem zabiegów elektrochirurgicznych. Dym powstający podczas przycinania i koagulacji tkanek może pogarszać widoczność pola operacyjnego. Zmniejsza także komfort pracy zespołu operacyjnego.

Dym operacyjny może w dłuższym okresie czasu mieć negatywny wpływ na zdrowie osób wykorzystujących elektrochirurgię w codziennej pracy.

Odsysacz dymu ARIA przeznaczony jest do odsysania i filtrowania dymu chirurgicznego i aerozoli powstałych w wyniku kontaktu narzędzi chirurgicznych z tkanką ludzką.

System ARIA kompatybilny ze SPECTRUM oraz pozostałymi urządzeniami EMED pozwala na bezpieczną i komfortową pracę w sali operacyjnej.

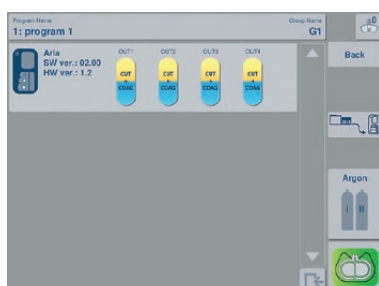

Zalety odsysacza ARIA:


- **ciche działanie** nie zakłóca pracy podczas zabiegów operacyjnych
- długa, **35-0 godzinna żywotność** filtra pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia
- wszechstronny, **3-portowy filtr** pozwala na podłączenie akcesoriów 6 mm, 9,5 mm lub 22 mm bez stosowania dodatkowych adapterów
- **regulowany przepływ** umożliwia dostosowanie parametrów pracy do aktualnych potrzeb
- możliwe **sterowanie ręczne lub przy użyciu włącznika nożnego** w przypadku używania z pozostałymi urządzeniami elektrochirurgicznymi
- integralny z systemem elektrochirurgicznym **SPECTRUM** – automatyczne uruchomienie pozwala na odsysanie wraz z aktywacją cięcia lub koagulacji

Dane techniczne odsysacza dymów ARIA

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA	
Ochrona przeciwporażeniowa	Klasa I
Część aplikacyjna	typu CF
Klasa IP	IPX1
ZASILANIE	
Napięcie znamionowe	220 V lub 240 V 50/60 Hz
Moc silnika	1000 Wat +/- 10%
Regulacja przepływu	TAK - 3 poziomy
INNE	
Poziom hałasu	Max. 55,0 dB
Włącznik nożny	Pneumatyczny
Ssanie statyczne silnika	25,69 kPa (6,5 mm otwór)
Praca zdalna	TAK (SPECTRUM)
WYMIARY I WAGA	
Wymiary	394 mm x 279 mm x 152 mm
Waga	4,3 kg
STANDARDOWY PRZEWÓD SSĄCY/ ŚREDNICA	
22 mm	708 LPM (litrów na minutę)
9,5 mm	130 LPM (litrów na minutę)
6,4 mm	57 LPM (litrów na minutę)



Wyposażenie systemu odsysania dymów operacyjnych ARIA

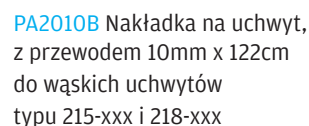

Informacje zawarte w tej ulotce są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia i dystrybutorów sprzętu medycznego.

REF 2023.01.K25.PL



Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu. Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl



Uwaga! Niniejsza ulotka nie zastępuje instrukcji używania! Należy zapoznać się z instrukcją używania!

Copyright© EMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody EMED jest zabronione.

EMED SP. Z O. O. SP. K. | Ryżowa 69a | 05-816 Opacz-Kolonia
tel: 22 723 08 00 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

emed
confidence in performance